

COVID-19 | Anleitung für die Einzeltestung




Um die Pandemie in Schulen und Kindergärten besser unter Kontrolle zu bringen, wird Ihrem Kind die Testung auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 empfohlen.

In der Einrichtung haben die Kinder bereits eine erste Testung durchgeführt, bei der mehrere Proben in einer PCR gemeinsam gemessen wurden („Pool-Probe“). Fällt dieser Pool-Test positiv aus, sind Kinder mit SARS-CoV-2 infiziert. Sollte dies zutreffen, bekommen Sie diesbezüglich weitere Information über Ihre Einrichtung. Bitte öffnen Sie erst dann den Druckverschlussbeutel und führen die Probennahme durch. Bis dahin bewahren Sie den Beutel bitte bei Raumtemperatur auf.

Um die Probennahme für Ihr Kind sicher und angenehm zu gestalten, kommt auch bei der Abnahme zu Hause die „Lolli-Methode“ zum Einsatz. Im von der Einrichtung übergebenen Druckverschlussbeutel finden Sie einen sterilen Tupfer, den Sie Ihrem Kind geben und an dem, wie bei einem Lutscher/Lolli, 30 Sekunden gelutscht wird. Im Anschluss verpacken Sie den Tupfer in der mitgelieferten Proben tüte und bringen diese in die Einrichtung, von wo der Transport ins SYNLAB-Labor erfolgt. Dort wird mit einer sehr sensitiven PCR-Methode die Analyse durchgeführt.

Der Druckverschlussbeutel enthält folgende Materialien:

- a) Proben tüte
- b) Tupfer in Transportröhrchen
- c) Strichcode-Set
- d) Auftragschein
- e) QR-Code-Set

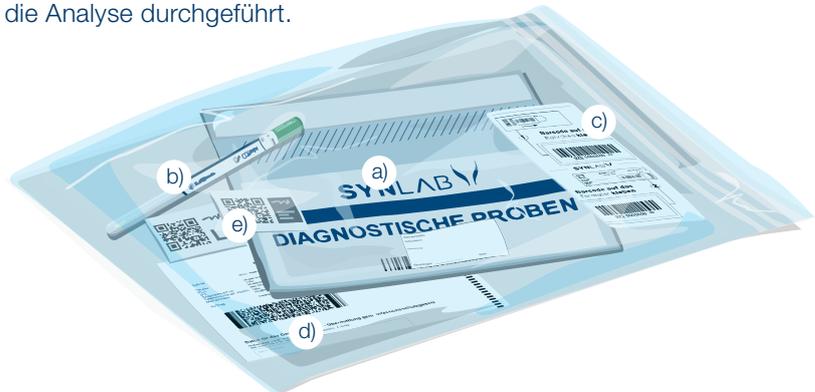

Vorbereitung



Beschriften Sie den Aufkleber der Proben tüte mit Ihrer Telefonnummer, dem Namen und Vornamen sowie der Einrichtung und Klasse/Gruppe Ihres Kindes.

Sie bringen den mit (1) markierten Strichcode bitte in Längsrichtung auf dem Transportröhrchen an. Nicht um das Röhrchen wickeln!

Sie bringen den mit (2) markierten Strichcode im Feld oben rechts auf dem Auftragschein auf.



Sie füllen den Auftragschein mit den Daten Ihres Kindes aus. **Bitte unbedingt vollständig ausfüllen!**

Die Einrichtung sowie ggfs. das Gesundheitsamt Ihres Kindes erhält den Befund der Individualtestung. Möchten Sie den Befund ebenfalls erhalten, stimmen Sie bitte der Übertragung in die Corona-Warn-App zu und kleben den mit „L“ markierten QR-Code in das Feld unten links. Sie bewahren den anderen QR-Code (mit schwarzem Rand) für den Befundabruf auf.

Alternativ können Sie auch die **SYNLAB-App „Mein-Laboregebnis“** für den Befundabruf nutzen. Den QR-Code dann bitte ebenfalls einkleben, die Zustimmung zur Übertragung ist dann optional.




Anleitung für die Probennahme



Entnehmen Sie den Tupfer im Transportröhrchen aus dem Druckverschlussbeutel. Ziehen Sie den Tupfer aus dem Transportröhrchen heraus und geben Sie ihn Ihrem Kind.

Ihr Kind nimmt den Tupfer mit der wattierten Seite in den Mund und lutscht 30 Sekunden darauf: Mit der Zunge hin- und herbewegen. **Nicht kauen!**

Sie stecken den Tupfer anschließend in das Transportröhrchen und verschließen dieses sorgfältig.

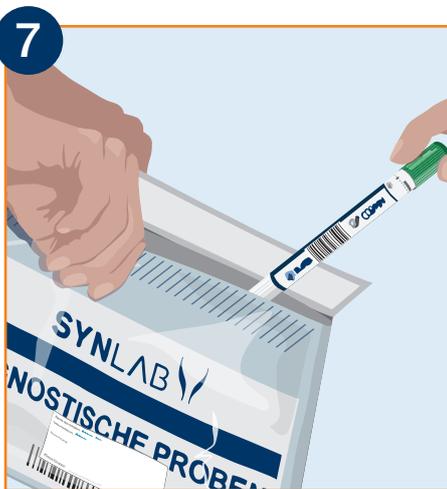

Sie stecken das Transportröhrchen in die Proben-tüte. Verschließen Sie die Proben-tüte mit dem Klebeverschluss.

Direkt im Anschluss bitte Hände desinfizieren und/oder gründlich waschen!

Bitte bringen Sie die Probe schnellstmöglich in die Einrichtung mit!

Informationen zur Rückgabe (insbesondere die Abgabezeiten) oder zum weiteren Transport erhalten Sie von Ihrer Einrichtung.

Über das Ergebnis der PCR-Analyse werden Sie über die Einrichtung, die Corona-Warn-App oder die SYNLAB-App „Mein Laborergebnis“ informiert.



Befundabfrage per QR-Code:

Per Corona-Warn-App oder

Mein-Laboregebnis-App installieren

Wichtig: Zugriff auf Kamera erlauben

